

Windowsベース
動物用画像ビューワ・システム





FiloVX






複数の検査画像を比較表示。
マルチ・モダリティ対応と
独自の4検査比較ツールで
過去の検査との比較や検査説明
に便利な機能です。

CR.DX画像に特化したVHS計測。
心臓の長軸、短軸、計測開始椎
体を決定し、椎体の数を入力す
るだけです。
結果は、画像と共に保管します。

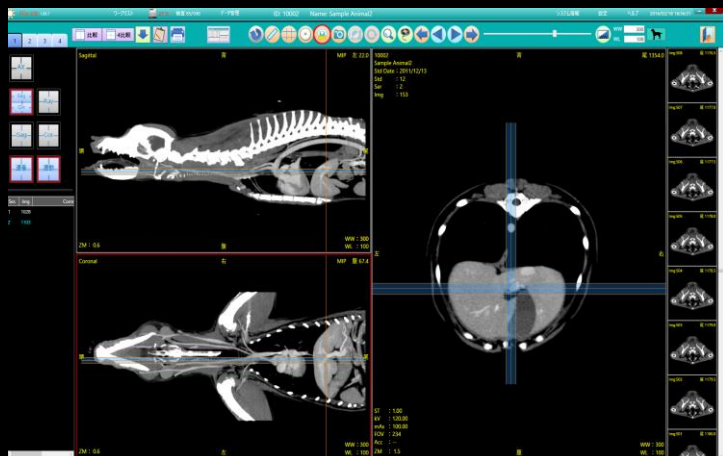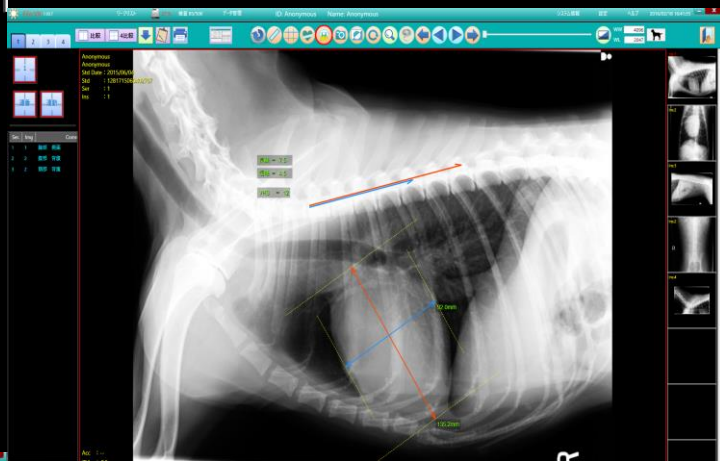


CT画像に特化したMPR機能。
矢状断、冠状断画像のみならず
任意の断面も作成可能。
またデータの厚みと画像処理を
変更するとMPVR画像も表示。
疑似X線画像や造影された血管
を強調し表示するMIP画像も
表示する事が可能です。

US画像やXA画像に特化したマ
ルチフレーム表示機能。
連続した画像を動画として表示
し、画像診断を協力的にサポー
トします。

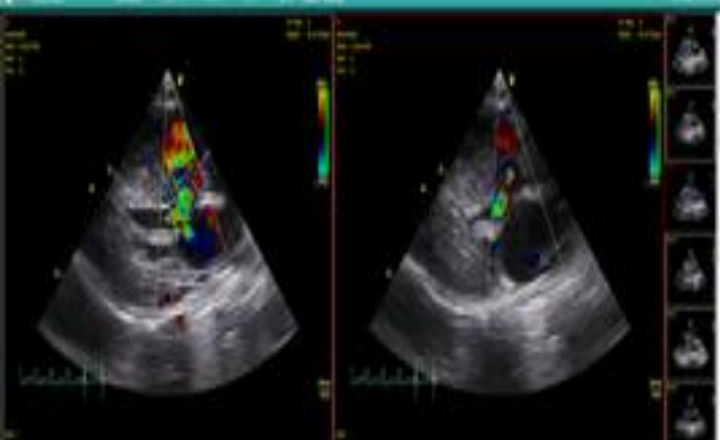


診断記録、保存や説明用資料と
してのレポート機能。

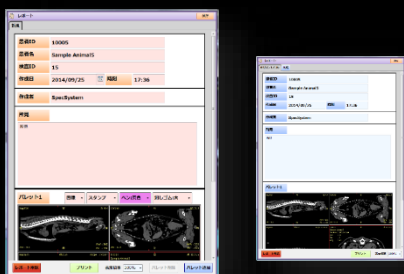

Windowsベース 動物用画像ビューワ・システム

FiloVX

<基本仕様>

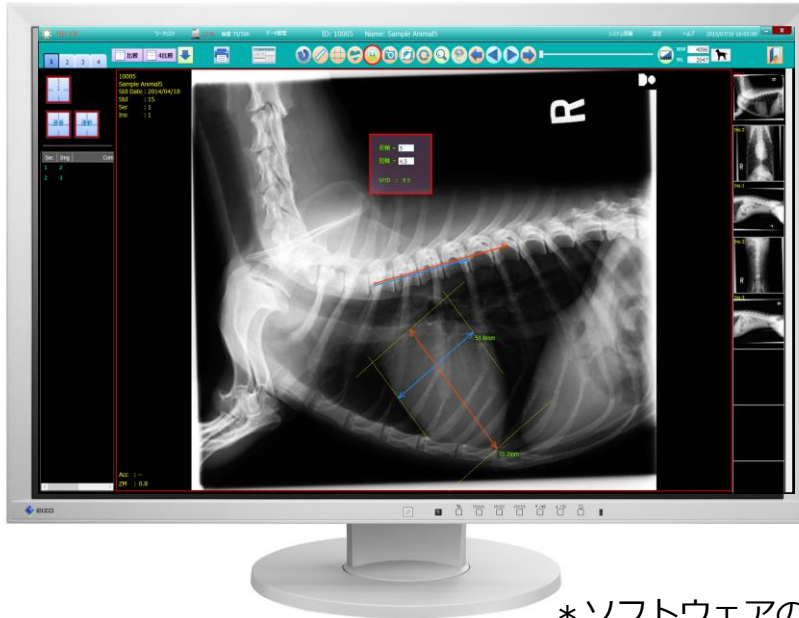

*ソフトウェアのみの販売も可能です。

機能	仕様
OS	Windows 7 Professional 64 bit
CPU	Intel Core i7
記憶媒体・容量	500GB以上
メモリ	16GB
モニタ	24.インチ カラー液晶モニター (1920x1200)
付属品	マウス・キーボード
Network	Giga Bit Ethernet推奨
画像受信	DICOM準拠 CT/DX/US/MRI/CR/AX
画像処理	マルチフレーム表示 サジタル表示 (CT) コロナル表示 (CT) アキシャル表示(CT) レイサム表示(CT) * マルチアングル可 MIP表示、MinIP表示、Average表示(CT) * マルチアングル可 シネ(動画)表示 Study比較表示、Series比較表示、 画像同期表示、スライス同期表示 (CT)白黒反転表示 VHS計測機能 レポート作成機能

機能は予期無く変更される場合がございます。
詳細は弊社までお問い合わせください。



株式
会社

スペック・システム



神奈川県川崎市中原区上丸子山王町2-1326 藤光ビル2F

☎ 044-750-0151

Fax044-750-0155

<http://www.specsystem.co.jp>



<https://www.facebook.com/FiloVX>