

動物専用 DICOM画像ビューワ


FiloVX




🐾 アカデミック版
こんな事が出来るワン🐾

多断面表示が出来るニャン!!


Image Loadしたあとに矢印で示すアイコンを使うと
様々な角度の画像が見れるニャン。
Rayを押すと任意断面作成になるニャン。

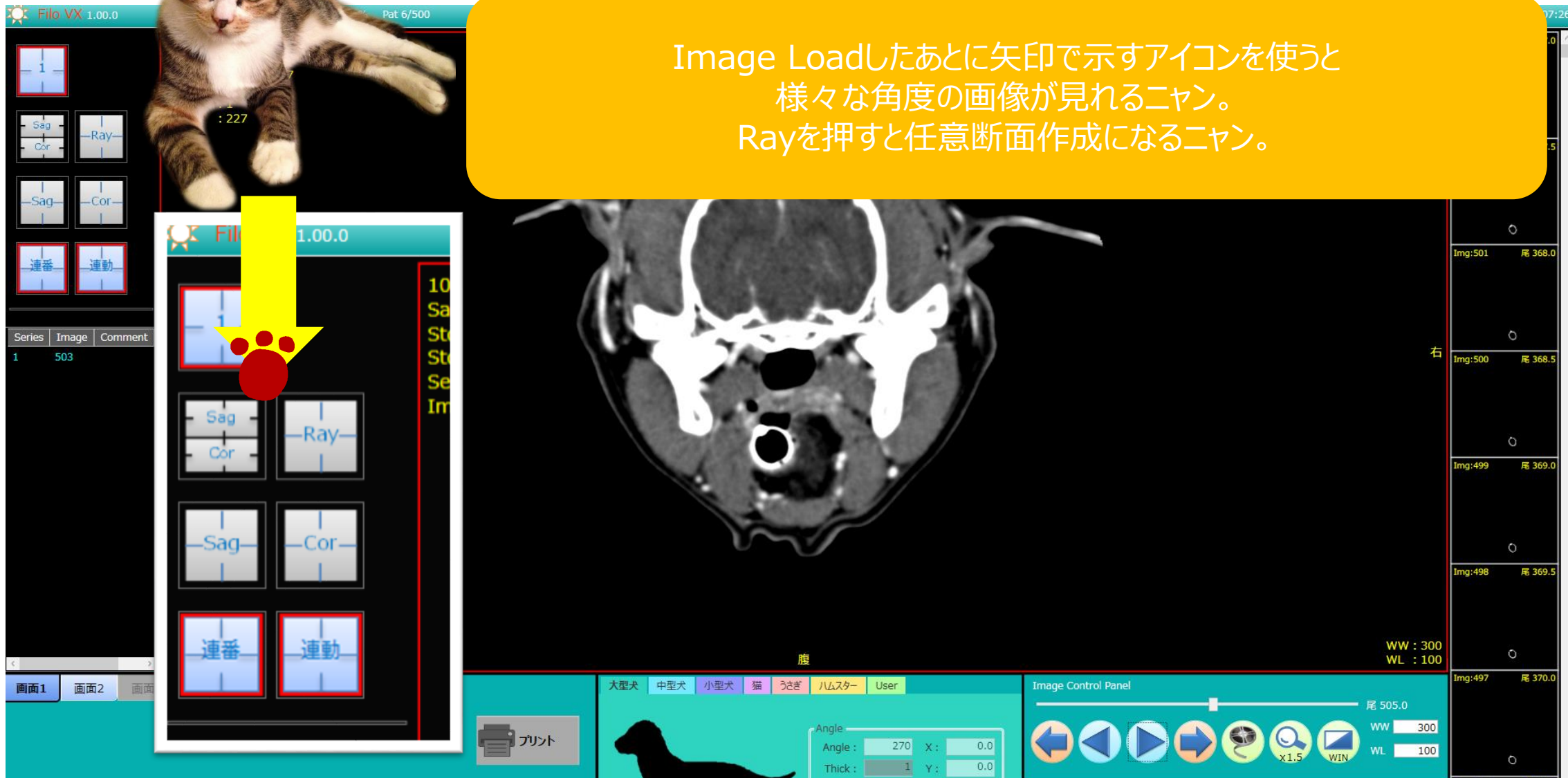

矢状断/冠状断出来たかニャー!!

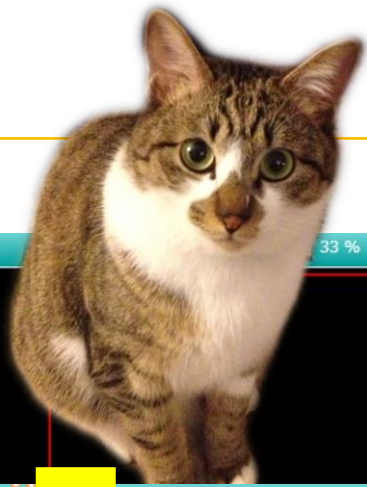


僕は、Sag/Corを使って見たニャン。(矢印のアイコンだニャン)
画像の位置を動かしたい時は、各画像上のオレンジの線を
ドラッグして動かしてみてニャン。

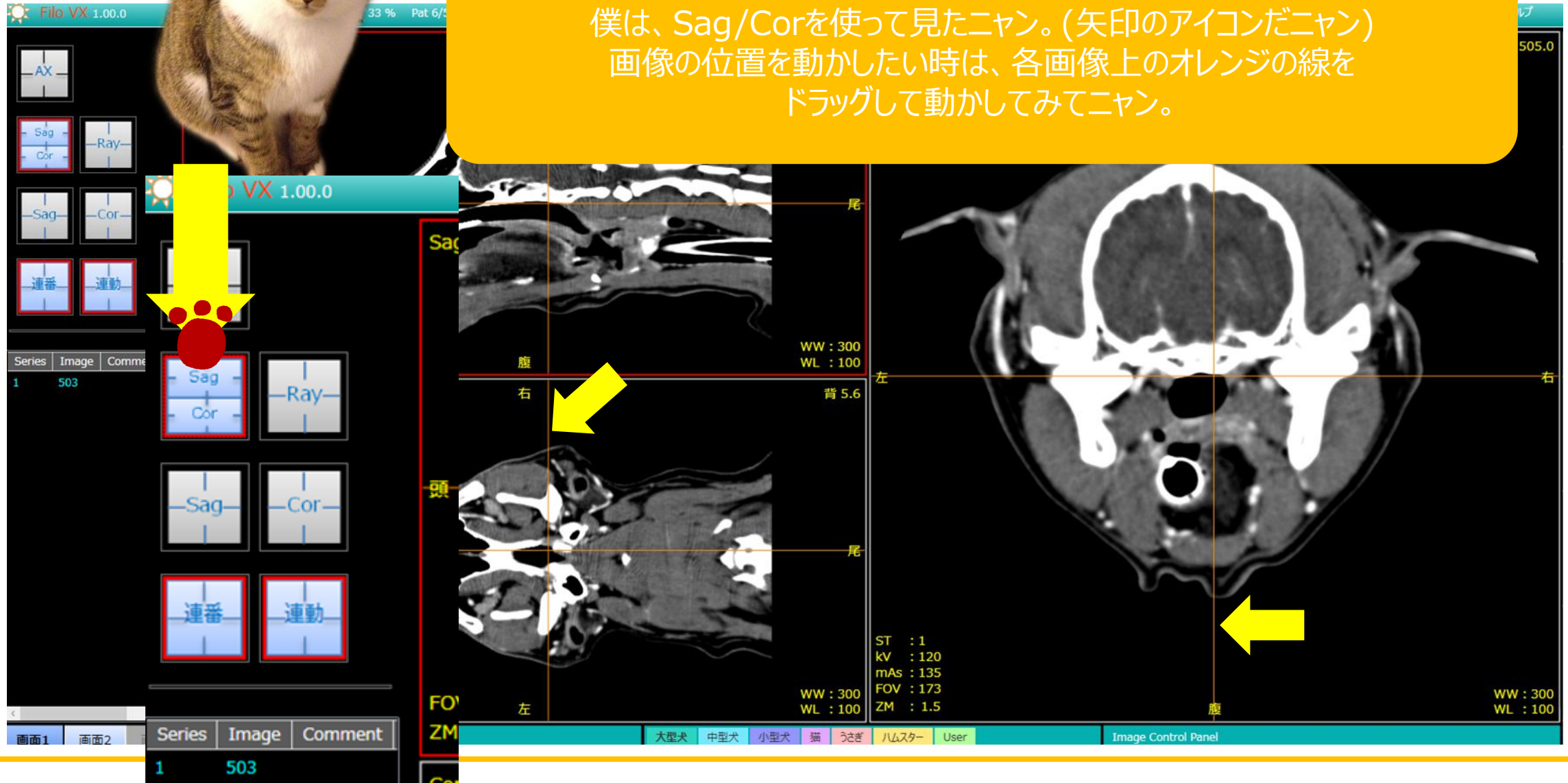

画像比較が出来るわん!!


画面1に単純CT(MRIのT1 とか)
画面2に造影CT(MRIのT2 とか)

同じ病気の動物画像の比較とかも出来るワん!!

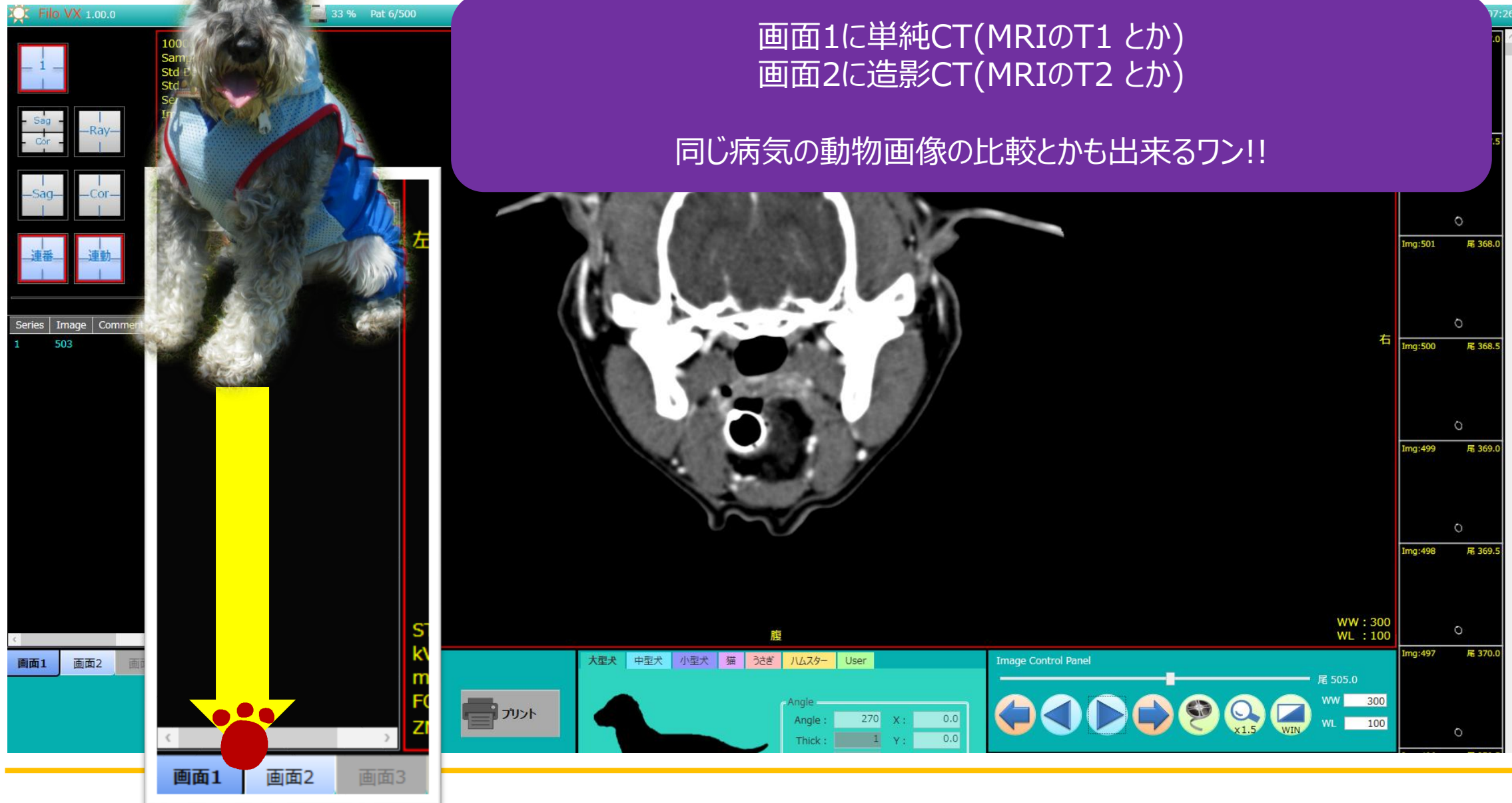

画面1 画面2 画面3

比較出来たかGululu!!

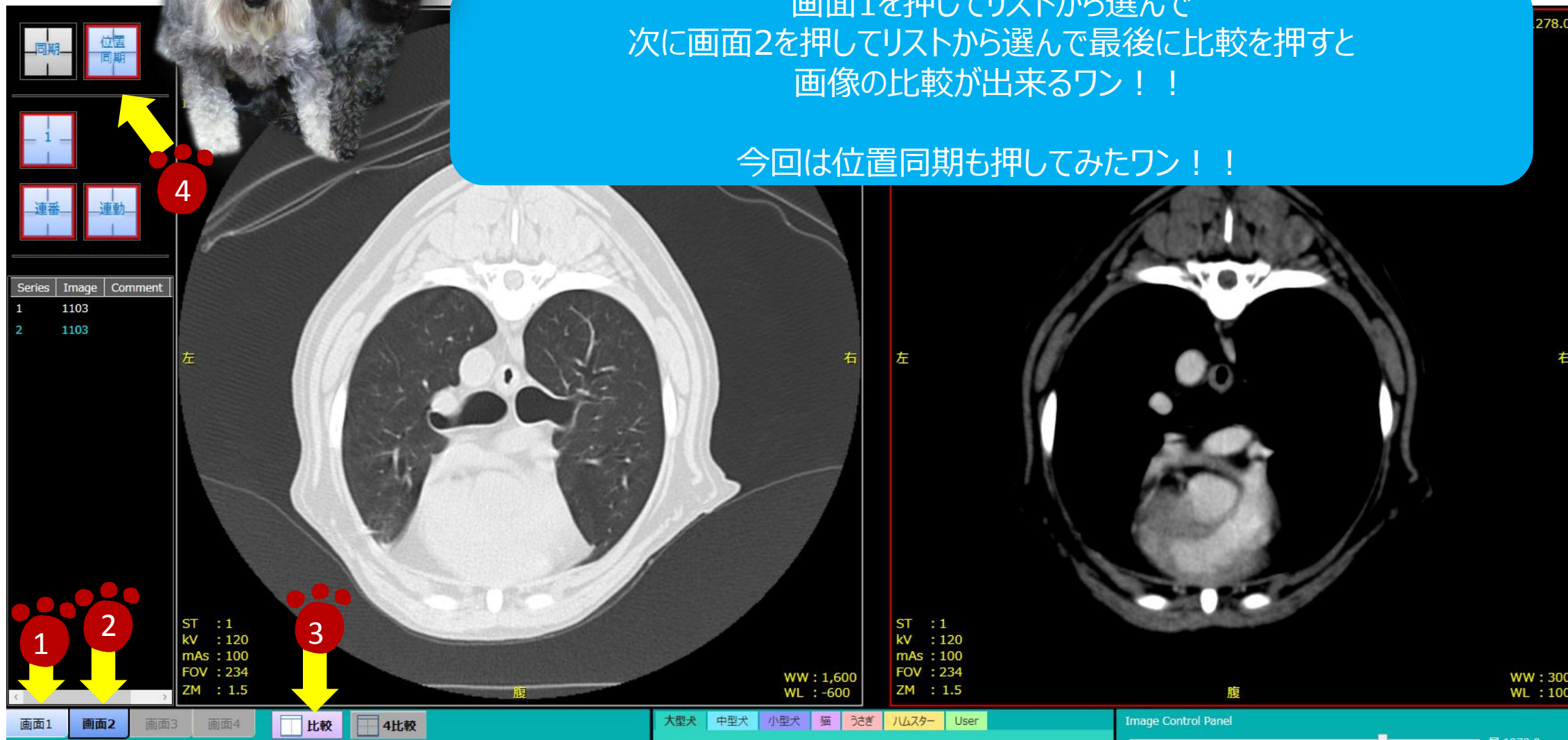

画面1を押してリストから選んで
次に画面2を押してリストから選んで最後に比較を押すと
画像の比較が出来るワン！！

今回は位置同期も押してみたワン！！

Series	Image	Comment
1	1103	
2	1103	

左 右

ST : 1
kV : 120
mAs : 100
FOV : 234
ZM : 1.5

WW : 1,600
WL : -600

左 右

ST : 1
kV : 120
mAs : 100
FOV : 234
ZM : 1.5

WW : 300
WL : 100

画面1 画面2 画面3 画面4 比較 4比較

大型犬 中型犬 小型犬 猫 うさぎ ハムスター User

Image Control Panel

動物専用 DICOM画像ビューワ

Filovx

製品版だともっともっと
色々な事が出来るよ!!

